



# SafeDrop™ Sharps Mail Back Program

A convenient service to dispose of your sharps waste

## Your Container System Includes:

Container size may vary



- This instruction sheet
- White return shipping box with biohazard symbol and Merchandise Return Label
- Brown inner box
- Plastic bag with tie
- Red sharps collection container with absorbent material inside
- Tape strips
- Serialized tracking document in a plastic pouch on return shipping box

This SafeDrop container system contains supplies you need to help you safely package and dispose of your sharps waste. When properly packaged by the waste generator, this SafeDrop container system complies with U.S. Postal Service requirements for shipping sharps waste for disposal through the U.S. Mail. **DO NOT** place this container system in the mail if it has not been properly assembled and secured. **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RETURN WEIGHT LISTED ON THE WHITE BOX.**

## GETTING STARTED

### Save the System Components:

1. Remove the white kit from the mailing box you received it in. **DO NOT** discard the white box or its contents. They will be needed to return your full SafeDrop container system for disposal.
2. Open the white box and the brown inner box, but **DO NOT REMOVE** brown inner box from white box.
3. Open the plastic bag inside the brown inner box and remove red sharps container.
4. **DO NOT** discard the white return shipping box, or any of the contents! Save all of these packaging items in a dry area. They must be used to properly reassemble the container system prior to mailing.

### Place Used Sharps into the Sharps Container:

Place the red sharps container near the point of use. Always be sure to keep the container away from children.

1. Place sharps into container with sharp end pointed away from you.
2. Once the contents reach the maximum fill line, snap the cap onto the base and press down to secure. Make sure the cap is firmly affixed prior to shipping.

### ⊗ These items **DON'T** go in the SafeDrop sharps container:

- Human remains
- Pathological waste
- Category A waste
- Hazardous waste
- Radioactive waste
- Pharmaceutical waste (including controlled substances)
- Chemical wastes
- Universal wastes
- Compressed gas cylinders, canisters, inhalers or aerosol cans
- Chemotherapy waste



Scan the QR code for Stericycle's Waste Acceptance Policy and complete list of prohibited items.

## IMPORTANT REMINDERS:

- Fill the sharps container with sharps waste only (used injector pens, syringes, lancets, etc.)
- **DO NOT OVERFILL!**
- Total residual fluid allowed is limited to 50 ml

*Sharps Medical Waste, for USPS purposes, means "a medical waste object that is capable of cutting or penetrating skin or packaging material and that is contaminated with a pathogen or may become contaminated with a pathogen derived from the medical treatment, diagnosis, immunization, or biomedical research of a human or animal. Sharps include used medical waste such as needles, syringes, scalpels, broken glass, culture slides, culture dishes, broken capillary tubes, broken rigid plastic, and exposed ends of dental wires."*

Reference: USPS Publication 52

# Preparing the SafeDrop Container System for Return Shipment

Once the red container is full, you're ready to return your postage-paid container system



## Seal the Container System

Once ready for final closure, close the sharps container. Carefully place the sealed red sharps container into the plastic bag. Securely seal the plastic bag using the tie provided.



## Prepare for Mailing

Insert sealed red sharps container into the return box and seal brown inner box shut with provided tape strip.



## Keep a Record

Remove serialized tracking document from pouch on side of white box. Do not damage pouch; completed form must be reinserted and pouch zipped shut.



## Mail the Container System

Close white outer shipping box and tape shut with provided strips. Use extra tape if necessary. Enter your complete return address on the Merchandise Return Service mailing label on top of box.

**NO P.O. BOXES ALLOWED.**

Mail the properly sealed kit through a U.S. Postal Office or give to your postal carrier for mailing.

- In the section marked "Generator," where your address is printed, **VERIFY YOUR INFORMATION IS CORRECT** or if not, print or correct information. **YOU MUST INCLUDE A VALID PHONE NUMBER.** In the section marked, "Generator Certification", print and sign your name.
- Remove bottom copy of document and keep for your records.
- Place three remaining copies back into pouch and close.

If you have any questions or are missing any part of this SafeDrop container system, please contact us at **866-783-3155** or visit **stericycle.com**



# Programa de devolución por correo de objetos punzantes SafeDrop™

Un práctico servicio para eliminar los desechos punzantes

## Su sistema de contenedores incluye:

El tamaño del envase puede variar



- Esta hoja de instrucciones
- Caja de envío de devolución blanca con símbolo de peligro biológico y etiqueta de devolución de la mercancía
- Caja interior marrón
- Bolsa de plástico con precinto
- Contenedor rojo para la recolección de objetos punzantes con material absorbente en el interior
- Cintas adhesivas
- Documento de seguimiento serializado en una bolsa de plástico en la caja de envío de devolución

Este sistema de contenedores SafeDrop incluye todo lo que necesita para embalar y desechar de forma segura los desechos punzantes. Cuando el generador de los residuos lo embale correctamente, este sistema de contenedores SafeDrop cumplirá con todos los requisitos del Servicio Postal de los EE.UU. para el envío de desechos punzantes mediante el Correo de los EE.UU. para su eliminación. **NO** coloque este sistema de contenedores en el correo si no se ensambló ni se aseguró de la forma correcta. **NO EXCEDA EL PESO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN INDICADO EN LA CAJA BLANCA.**

## PREPARACIÓN

### Guarde los componentes del sistema:

1. Retire el kit blanco de la caja de envío en la que lo recibió. **NO** deseche la caja blanca ni su contenido. Esta será necesario para devolver todo el sistema de contenedores SafeDrop para su eliminación.
2. Abra la caja blanca y la caja interior marrón, pero **NO RETIRE** la caja marrón de la caja blanca.
3. Abra la bolsa de plástico que está dentro de la caja interior marrón y retire el contenedor rojo para objetos punzantes.
4. **NO** deseche la caja de envío blanca para devoluciones ni su contenido. Guarde todos estos artículos de embalaje en un área seca. Los mismos deben utilizarse para volver a montar el sistema de contenedores de forma correcta antes de enviarlos por correo.

### Coloque los objetos punzantes usados en el contenedor para objetos punzantes:

Coloque el contenedor rojo para objetos punzantes cerca del punto de uso. Asegúrese siempre de mantener el contenedor fuera del alcance de los niños.

1. Coloque los objetos punzantes en el recipiente con el extremo afilado apuntando en dirección opuesta a usted.
2. Una vez que el contenido alcance la línea de llenado máximo, coloque la tapa en la base y presione hacia abajo para asegurar. Asegúrese de que la tapa esté firmemente fijada antes del envío.

⊗ Estos artículos **NO** se colocan en el contenedor de objetos punzantes SafeDrop:

- Restos humanos
- Residuos patológicos
- Residuos de categoría A
- Residuos peligrosos
- Residuos radiactivos
- Residuos farmacéuticos (incluidas las sustancias controladas)
- Residuos químicos
- Residuos universales
- Cilindros de gas comprimido, recipientes, inhaladores o latas de aerosol
- Residuos de quimioterapia



Escanee el código QR de la Política de aceptación de residuos de Stericycle y complete la lista de artículos prohibidos.

## RECORDATORIOS IMPORTANTES:


- Llene el contenedor para objetos punzantes solo con residuos punzantes (plumas inyectoras usadas, jeringas, lancetas, etc.)
- ¡NO LO LLENE EN EXCESO!
- El líquido residual total permitido está limitado a 50 ml

*Desechos médicos punzantes, para los fines de USPS, significa "un objeto de desecho médico que es capaz de cortar o penetrar la piel o el material de embalaje y que está contaminado con un patógeno o puede contaminarse con un patógeno derivado del tratamiento médico, diagnóstico, inmunización o investigación biomédica de un ser humano o animal. Los objetos punzantes incluyen desechos médicos usados como agujas, jeringas, bisturíes, vidrios rotos, placas de Petri, tubos capilares rotos, plástico rígido roto y extremos de alambres dentales expuestos".*

Referencia: Publicación de USPS 52

# Preparación del sistema de contenedores SafeDrop para el envío de devolución

Una vez que el contenedor rojo esté lleno, usted estará listo para devolver su sistema de contenedores con franqueo pagado

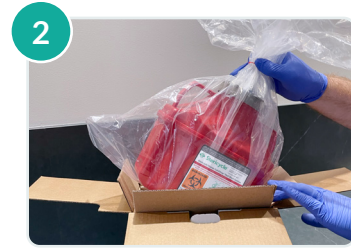

## Selle el sistema de contenedores

Cuando esté listo para el cierre definitivo, cierre el contenedor para objetos punzantes. Coloque con cuidado el contenedor rojo para objetos punzantes sellado dentro de la bolsa de plástico. Selle bien la bolsa de plástico con el precinto suministrado.

## Prepárese para enviarlo por correo

Inserte el contenedor rojo para objetos punzantes sellado en la caja de devolución y selle la caja interior marrón con la cinta adhesiva suministrada.



## Mantenga un registro

Retire el documento de seguimiento serializado de la bolsa del lateral de la caja blanca. No dañe la bolsa; el formulario cumplimentado debe volver a guardarse y la bolsa debe cerrarse con cremallera.

## Envíe por correo el sistema de contenedores

Cierre la caja de envío exterior blanca usando la cinta adhesiva suministrada. Use cinta adicional si es necesario. Ingrese su dirección de devolución completa en la etiqueta de envío del Servicio de devolución de mercancías que se encuentra en la parte superior de la caja.

### **NO SE PERMITEN APARTADOS POSTALES.**

Envíe por correo el kit debidamente sellado a través de una Oficina de Correos de los EE. UU. o entrégueselo a su transportista postal para que lo envíe por correo.

- En la sección marcada como "Generator", donde está impresa su dirección, VERIFIQUE QUE SU INFORMACIÓN ESTÉ CORRECTA o, de no ser así, imprima o corrija la información. DEBE INCLUIR UN NÚMERO DE TELÉFONO VÁLIDO. En la sección marcada como "Certificación del generador", firme y escriba su nombre.
- Saque la copia de la parte inferior del documento y guárdela para sus archivos.
- Vuelva a colocar las tres copias restantes en la bolsa y ciérrela.

Si tiene alguna pregunta o le falta alguna parte de este sistema de contenedores SafeDrop, comuníquese con nosotros al **866-783-3155** o visite **stericycle.com**